


VSRAD結果画像をそのままDICOM化してPACSへ送信

VSRAD[®] to PACS

VSRAD解析結果を簡単・安全・高速にPACS連携

VSRAD解析結果として出力された画像を自動でDICOM化し、PACSへ送信するWindowsアプリケーションです。
シンプルな操作で、日常業務の効率化と確実な保存を実現します。

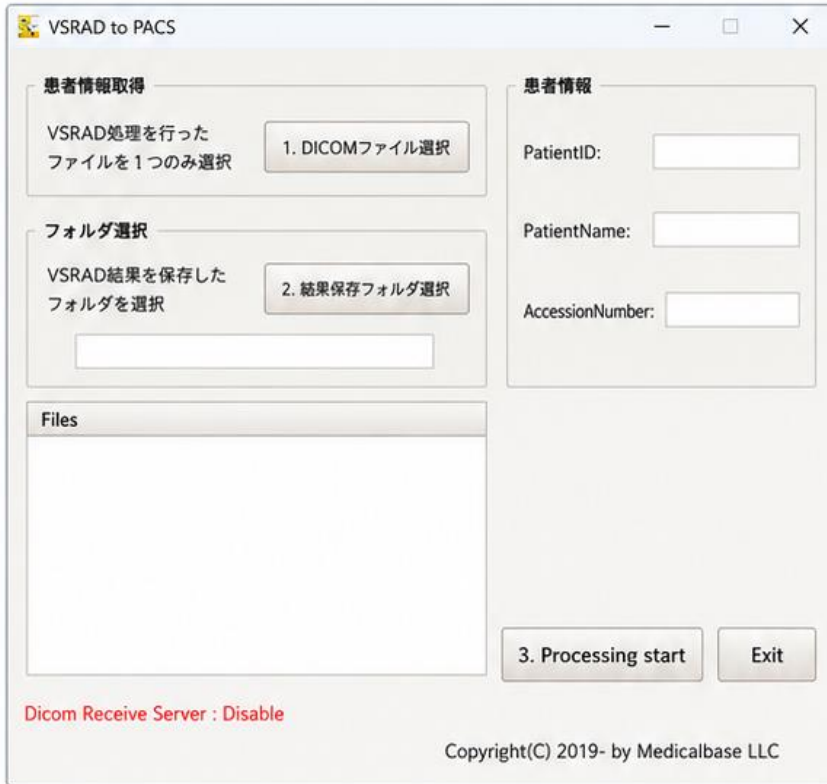


VSRADは、エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社の登録商標です。

主な機能

- 患者情報の自動取得**
VSRAD解析に使用したDICOMから患者情報を自動で取得します。
- VSRAD画像をDICOM化**
JPG / PNG / BMP画像をSecondary CaptureとしてDICOM化します。
- PACSへ直接送信**
DICOM C-STOREでPACSへ直接送信します。
- DICOM受信サーバ対応** ※option
Storage SCP機能を搭載。受信したDICOMを自動保存します。
- 高い互換性と安定性**
GE PACS文字コード対策対応。タイムアウト設定など実運用に最適化。

ワークフロー

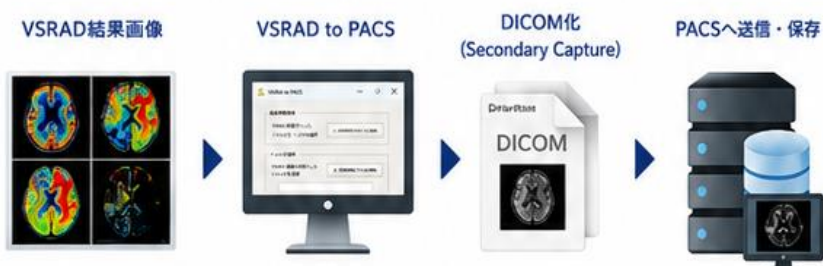

3ステップの簡単操作でPACSへ保存完了!

- 1 元DICOM選択**
VSRADで使ったDICOMを1つ選択
- 2 結果フォルダ選択**
VSRAD結果画像が保存されたフォルダを選択
- 3 Processing Start**
DICOM化してPACSへ送信自動で完了します

対応・仕様

対応OS	Windows 10 / 11
対応画像形式	JPG / JPEG / PNG / BMP
DICOM通信	C-STORE / C-ECHO
SOP Class	Secondary Capture Image Storage
Transfer Syntax	Explicit VR Little Endian
配布形式	Standalone EXE (インストール不要)



シンプル操作
わかりやすい画面で
どなたでも簡単に操作可能



安全・確実
DICOM標準準拠で
安心して運用可能



高速・効率的
画像の自動処理で
業務効率を向上

